

AXIONXELECT

Zimmer
Benelux

Quality for Professionals

Dé onderzoeks- en behandelbank voor een kleine behandelruimte en voor een beperkt budget. Door het schaarmechanisme gaat de AxionXelect geheel rechtstandig omhoog. Hierdoor heeft de AxionXelect genoeg aan slechts 1,4 m²! Simpel te bedienen door de gemakkelijk in te stellen bladdelen en altijd stabiel. Een prijsvriendelijke variant voor iemand die weinig ruimte beschikbaar heeft. De AxionXelect behandelbank kent twee 2-delige varianten, een 3-delige variant en een tractievariant.



- Elektrische hoogteverstelling van 48 tot 105 cm
- Bladverstelling d.m.v. gasveren
- Ergonomische handgrepen waardoor met één hand te bedienen
- Ruimtebesparend door het schaarmechanisme: de bank gaat rechtstandig omhoog
- Bladen met dikke polstering en zachte randen
- Dankzij het neusgat (afdekkussentje is optioneel) ligt de patiënt ook comfortabel in buikligging




AXIONXELECT




Quality for Professionals


AXIONXELECT 3-DELIG

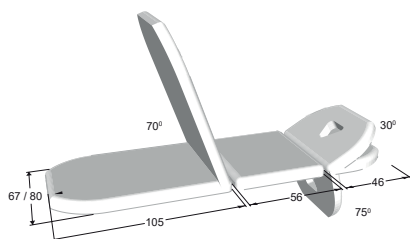

AXIONXELECT 2-DELIG HOOFDDEEL

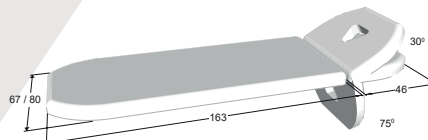

AXIONXELECT 2-DELIG RUGDEEL

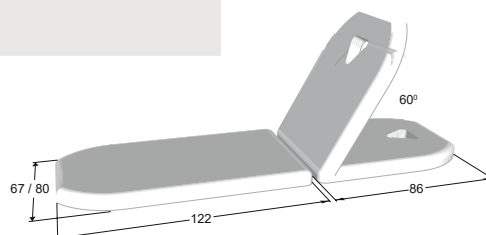


AXIONXELECT

Zimmer
Benelux

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (lxb):	207 - 209 x 67 cm (optioneel 80 cm breedte)
Hoogteverstelling:	ca. 48-105 cm
Tijdsduur hoogteverstelling (min.-max.):	ongeveer 35 sec.
Hefvermogen:	150 kg (optioneel 250 kg)
Netspanning:	120/230VAC 50/60 Hz
Opgenomen stroom:	1.5 A-350W max. (licht) of 2.0 A-470 W max. (zwaar)
Kleurcodering frame:	grijs = RAË 7035
Dichtheid schuim:	38 kg/m

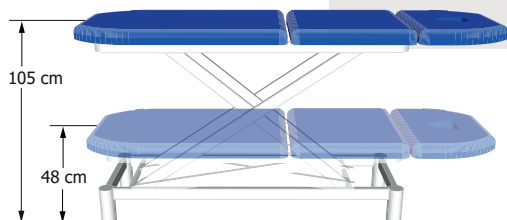

OPTIES AXIONXELECT



Quality for Professionals

Executive

					
012	213	199	204	169	170
black	grey	lavender	sirius blue	cornflower blue	baby blue


LET OP: opties moeten tegelijkertijd met de bank besteld worden omdat ze alleen gedurende het productieproces kunnen worden toegevoegd

FRAME KLEUREN



BEKLEDINGSVARIANTEN	
Bladbreedte	4 cm dik (standaard)
67 cm	S
80 cm ^{(1) (2)}	O

S = Standaard
O = Optioneel

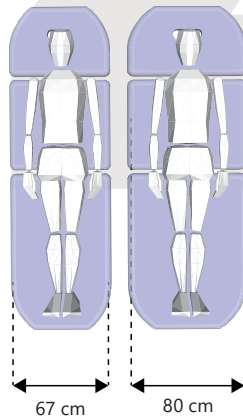

LET OP: opties moeten tegelijkertijd met de bank besteld worden omdat ze alleen gedurende het productieproces kunnen worden toegevoegd
(1) = Niet beschikbaar voor tractievariant
(2) = alleen in de kleuren 204, 213 en 199

Voor ieder interieur een eigen AxionXelect bank. Ook in fysiotherapiepraktijken is een goede uitstraling belangrijk. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen in de ruimte waar zij behandeld worden. Omdat iedere praktijk anders ingericht is en een eigen kleur heeft, vinden wij het belangrijk dat ook de behandelbank binnen uw concept en sfeer past. Vandaar dat wij de behandelbanken kunnen produceren in meerdere frame- en skaikleur.

Onze skaibekleding is ftalatenvrij, vlamvertragend en biocompatibel; een unieke combinatie die deze skai geschikt maakt voor medisch gebruik!



OPTIES AXIONXELECT



Quality for Professionals

HOOGTEVERSTELLING (ELEKTRISCH)

A. Rondombediening

B. Voetschakelaar

C. Handschakelaar



A



B



C

HEFVERMOGEN

A. Elektrisch - max. 150 kg (standaard)

B. Elektrisch - max. 250 kg (optioneel)



A




B

OVERIGE OPTIONELE MOGELIJKHEDEN

A. Rol-hefmechanisme met wielen

B. 1550801 Veiligheidsschakelaar

C. 1550804 Neerklapbare zijsteun (set van 2) ⁽¹⁾

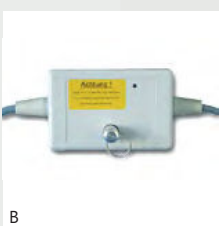

B



LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.

⁽¹⁾ = Niet geschikt voor banken van 80 cm breed, en niet geschikt voor tractievariant.

ACCESSOIRES AXIONXELECT

FIXATIEACCESSOIRES ⁽¹⁾	
1550815	Fixatiesteun zwart ⁽²⁾ (2 stuks)
1550806	Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder, oksel en voor gynoset
1550807	Bevestigingsbalk voor fixatiesteun oksel en voor gynoset
1550808	Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder.

PAPIERROLHOUDERS EN PAPIERROLLEN ⁽¹⁾	
1550800	Papierrolhouder voor de ManuXelect, voor 50 & 60cm rol, bevestigd aan voeteneinde
3445280	Papierrolhouder vrijstaand voor 50 & 60 cm rol
3445278	Papierrollen 50 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks
3445279	Papierrollen 60 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks



FIXATIEGORDELS	
3445023	Fixatiegordel met klittenbandsluiting 120 cm
3445014	Fixatiegordel met klittenbandsluiting 160 cm
3445015	Fixatiegordel met klittenbandsluiting 240 cm
3445475	Fixatiegordel met veiligheidssluiting 250 cm
3445474	Fixatiegordel met veiligheidssluiting 350 cm



3445023

3445014 / 3445015

3445474 / 3445475



⁽¹⁾ = Niet geschikt voor tractievariant of banken van 80 cm breed.

⁽²⁾ = Vereist bevestigingsbeugel 1550806, 1550807 of 1550808.

ACCESSOIRES AXIONXELECT



Quality for Professionals

GYNAECOLOGISCHE ACCESSOIRES

1550806 Bevestigingsbalk voor gynoset⁽¹⁾
(en voor fixatiesteun schouder, oksel)

1550807 Bevestigingsbalk voor gynoset
(en voor fixatiesteun oksel)

1550810 Gynoset Comfort, knieschalen⁽²⁾

1550805 Gynoset, voetsteun ⁽²⁾

⁽¹⁾ = niet geschikt voor tractievariant of banken van 80 cm breed

⁽²⁾ = vereist bevestigingsbeugel 1550806 of 1550807



1550810



1550805



15



1550807



DIVERSE ACCESSOIRES

3446261 Opstapbankjes, set van 3 stuks, 50 x 38 x 32 cm,
40 x 32 x 21 cm, 30 x 22 x 14 cm



3446261