



RF fractionnée par micro-aiguilles et HIFU

Remodelage du collagène, lifting & raffermissement


Système combiné 2 en 1

Polyvalence - Précision - Résultats


relLift combine une RF fractionnée par Micro-aiguilles et la technologie HIFU permettant une action complète sur la peau.

Cicatrices d'acné, réduction des rides et ridules, des pores, double menton, effet lifting de la peau




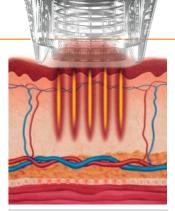


Tissus stimulés par les aiguilles à la profondeur désirée.

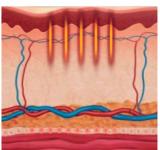

Cicatrisation des plaies, induction de la régénération et de la multiplication des fibroblastes.

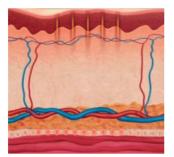

Après 3 semaines, néo-collagénèse et synthèse d'une nouvelle élastine.

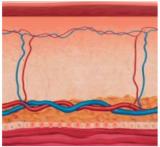

Remodelage du collagène: skintightening

Régénération du collagène

relLift permet une régénération, une stimulation et une réorganisation des fibres de collagène existantes. Les traitements de stimulation et d'induction du collagène, mieux connus sous le nom de "Skin resurfacing", sont parmis les plus sûrs et les plus demandés.

Parmi les plus utilisés, le microneedling cutané nécessite l'utilisation d'aiguilles à usage unique qui pénètrent délicatement à des profondeurs spécifiques de la peau. Le needling cutané stimule la libération de multiples facteurs de croissance qui, avec un effet cascade, induisent dans la zone traitée, la néo-collagénèse et la nouvelle élastine.

Pièce à main Ultrason Focalisé de Haute Intensité (HIFU)

re Lift





Contour des veux Double menton

Flasticité malaire

Raffermissement

Régénération du collagène

Lifting



Pièce à main avec Technologie Spécifique (transducteur à trou)

- · Minimise l'effet de phénomène de cavitation dans le transfert d'énergie
- · Génère un point de coagulation stable
- · Diminue les sensations de gênes lors des traitements

Pièce à main Ergonomique

- · Pièce à main ergonomique avec possibilité de changer les cartouches rapidement pour une utilisation quotidienne
- · Une prise en main immédiate de la poignée avec possibilité d'actionner en 3 points différents
- · Voyants de fonctionnement







Cartouches disponibles

- · 1.5 mm & 3.0 mm pour le derme du visage
- · 4.5 mm pour la couche profonde sous-cutanée du visage

Acné & cicatrices d'acné Cicatrices diverses Réduction des pores Amélioration du teint Vergetures

Lifting Raffermissement Réduction des rides / ridules Rajeunissement de la peau Neo-collagénèse

Pièce à main RF micro-aiguilles

Système unique d'aspiration

- Un traitement ciblé à la profondeur déterminée pour optimiser les résultats
- Permet d'éviter une pression sur la peau lors du traitement
- · Un traitement plus confortable

Une technologie avant-gardiste

- · Précision sophistiquée et unique
- · Permet des ajustements à 0.1 mm de précision
- · Offre un traitement agréable, contrôlé et délicat








Différents embouts adaptés à chaque traitement

- · Embout de 10 ou 25 aiguilles, de diamètre 0.16 mm (stérilisées)
- · Aiguilles isolées et non isolées
- · 10 niveaux de puissance en fonction des zones à traiter





Technologie RF fractionnée avec micro-aiguilles

RF micro-aiguilles en action

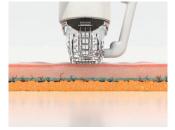



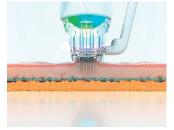

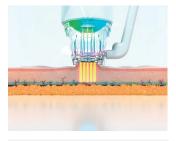

1. Contact des micro-aiguilles avec la peau

2. Aspiration activée


3. Pénétration des microaiguilles

4. RF délivrée


L'énergie RF est délivrée à une profondeur déterminée (précision 0.1 mm) à travers une aiguille isolée ou non-isolée. Le "temps de chauffe" est également ajustable par niveau de 100ms avec 10 niveaux différents.

Cette fléxibilité permet un traitement pour tout type de peau, en apportant le maximum de confort au patient.

Technologie d'aspiration unique

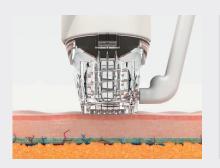



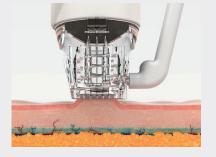


- · L'aiguille sera toujours à une profondeur de traitement identique
- Permet de traiter les zones fragiles et difficilement accessibles (contour des yeux, décolleté, dos des mains...)



Technologie HIFU

Le véritable effet lifting de la peau



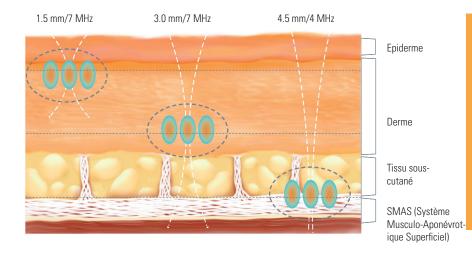


La pièce à main va permettre de créer un point de coagulation entre 65-80°C et ainsi permettre une néo-collagénèse parfaite, afin d'obtenir un effet lifting parfait et naturel.

Technologie relLift


Grâce à sa technologie unique, le relLift est capable de délivrer une énergie HIFU dans le derme à un point cible en évitant de créer un dommage au niveau de l'épiderme, qui pourrait compromettre le résultat et le ressentit du patient.

Pièce à main standard

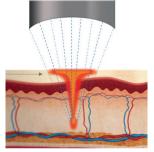

- Provoque des dommages cutanés et des effets secondaires
- Production excessive de chaleur
- · Augmentation de la douleur

Pièce à main ReLift

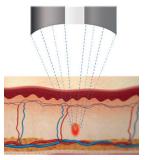

- Diminue les dommages cutanés et les effets secondaires
- Génère un point de coagulation défini
- Reduit la douleur

re Lift

STANDBY

Zimmer



32.9 _H

50.4 P

43.8 L

Dimensions (cm)

Radio-fréquence 2 MHz Système RF à micro-aiguilles

Ultrason 7 MHz, 4 MHz Système HIFU

Type d'energie

Pièce à main RF à Micro-aiguilles, pièce à main HIFU

MD

Embout, cartouche

AC 110~240V. 50/60 Hz

Puiceano

10, 25 aiguilles (isolée, non-isolée) RF fractionnée à Micro-aiguilles

SD 7-1.5, DD 7-3.0, SM 4-4.5

Système HIFU





Zimmer MedizinSysteme GmbH Junkersstraße 9 89231 Neu-Ulm, Germany Tel. +49 7 31. 97 61-291 Fax +49 7 31. 97 61-299 export@zimmer.de

www.zimmer-aesthetics.de



Visitez notre site Visitez notre site www.zimmer.de/en/